


癒しのひととき。

日頃の疲れにサンマッサー。
ご家庭で簡単にできる低周波治療で、
明日の元気をバックアップします。



家庭用低周波治療器

サン **マッサー ホット 55**

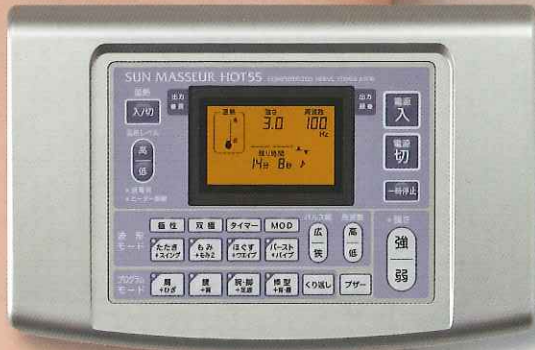

医療機器認証番号：222AGBZX00168000

東北電力生協組合員特別価格
187,000円 (税込)

⚠️ 安全に関するご注意

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。
*ペースメーカー等の体内植込み型医用電子機器

サンマッサーホット55の特徴


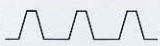



- 肩こりの緩解
- マッサージ効果
- 麻痺した筋肉の萎縮の予防

サンマッサーはなぜ効く？

わたしたちのからだの中をめぐっている神経には神経電流という弱いパルス電流が流れて、内臓の働きや手足の運動を制御しています。この神経電流と同じように周波数の低いパルス電流を利用した治療器がサンマッサーです。気持ちよい刺激が神経を興奮させ筋肉を収縮させるので、血行がよくなりこりや痛みをやわらげます。また血行が促進されることで新鮮な酸素や栄養がからだの細胞に供給され疲れを回復させます。

サンマッサーの基本波形は

	棘状波	強い刺激作用。
	台形波	刺激作用少ない。
	方形波	刺激電流量が適度で安全性と効果が高い。

サンマッサーに使用されているパルス電流は方形波です。治療波形のなかで痛みが少なく安全で治療効果があるといわれています。

進化する治療波形・治療プログラム

人間のからだは単調な刺激をきらい、変化のある波形は治療効果を高めます。自分にあつた治療波形を見つけることは非常に重要です。サンマッサーの治療波形は常に改良・見直しをしています。サンマッサーホット55は、8種類の治療波形を備えています。同じように、ボタン一つで、プロの治療が受けられる各治療箇所プログラムも改良を加え、8種類のプログラムがあります。棒型用プログラムは、極性を設定し直す必要のないプログラムです。治療波形、治療プログラムともに進化しています。

パワーを備えた本格的な治療器

首や肩は、出力が弱くても治療ができますが、腰や足は出力が強くなければ効果がありません。サンマッサーは本格的な治療に十分なパワーを備えています。

温熱導子の心地よさ

導子の中に特殊なヒーターを組みこんだ温熱導子が、患部を暖めながら低周波の治療ができます。特に寒い時期でも冷たい導子をからだにあてずにすみ、一年中、心地よい治療ができます。

温熱導子は、粘着性の導子ですから速く暖まります。そして水をつけずに、またベルトも必要としないので毎日手軽に治療することができます。

見やすいバックライト

周りが暗いと見にくかった液晶。しかし、バックライトがついているので暗いところでもよく見えます。また、温熱の温度や強さのレベルの視認性も向上。温熱機能を使用する時は液晶画面がオレンジ色に変わります。



▲温熱OFFの状態



▲温熱ONの状態

簡単操作のガイダンス機能

ガイダンス機能は、電源を入れた後、次にするべき操作を点滅するランプでお知らせしますので、誰でも簡単にサンマッサーでの治療をはじめいただけます。

治療プログラムの繰り返し

繰り返しはプログラム波形を選択しているときにプログラム終了後同じプログラム波形を1回だけ繰り返します。電源を入れ直すことなく、お好みの強さで、お気に入りのプログラムを簡単に繰り返すことができます。

他にも次のような機能があります。

- ① 周波数調整機能 (刺激の速さを調整できます)
- ② 極性切替 (導子の極性を切替えます)
- ③ パルス幅調整機能 (治療箇所に合わせてパルス幅を調整できます)
- ④ モデュレーション機能 (波形に変調を加え強い刺激になります)
- ⑤ 双極機能 (パルスの極性が交互に変わります)
- ⑥ 一時停止機能 (低周波出力を一時停止できます)



製造販売元  一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 正会員A-29号
丸菱産業株式会社
 本社：大阪市東淀川区南江口3丁目14番9号 ☎06(6327)2112

本社・工場：大阪市東淀川区南江口3丁目14番9号 ☎06(6327)2112
 営業本部：大阪市北区末広町1番3号 丸菱南森町ビル ☎06(6314)3221
 仙台支店：仙台市青葉区国分町1-8-13 仙台協立第一ビル ☎022(263)3011
 東京支店：東京都新宿区市谷薬王寺町58番地402 ☎03(3513)7756
 名古屋支店：名古屋市中区栄1丁目15番6号 ミヤシタビル ☎052(211)3797
 大阪支店：大阪市北区末広町1番3号 丸菱南森町ビル ☎06(6313)2715
 岡山支店：岡山市東区広谷385-24-153 ☎086(237)8058
 福岡支店：福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル ☎092(472)7381

丸菱健康センター：大阪市北区末広町1番3号 丸菱南森町ビル ☎06(6312)0667



FM 79948 / ISO 9001:2008
丸菱産業(株) 電子事業部



MD 606532 / ISO 13485:2003
丸菱産業(株) 電子事業部

▼丸菱産業(株)のホームページアドレス
<http://www.marubishi.com/>

<商品のお問合せ先>
丸菱産業株式会社
TEL：022-263-3011
 お問合せの際は、
 東北電力生協の組合員であることをお伝えください。